



WHERE YOU WANT TO BE.

Little Gem^{®2}





Little Gem^{®2}

Tão pequena e manejável
que te levará
a todas as partes





Com apenas 51 cms de largura e com um pequeno raio de giro a Little Gem®² é a scooter ideal para se mover tanto em interiores, bem como em exteriores.

Fácil de desmontar e transportar

A Little Gem®² desmonta-se facilmente, para que possas levá-la para qualquer parte. Apenas tens que retirar o assento, retirar as baterias e retirar a alavanca de desmontagem. O trem traseiro separa-se do resto da estrutura em poucos segundos.

Assim, podes guardá-la facilmente, por exemplo, na mala do carro.



Trem traseiro desmontável em segundos, com sistema de asa dupla para facilitar o transporte



Guiador dobrável e regulável em posição para facilitar o transporte

Confortável e maneável

Com o cesto dianteiro poderás levar objectos e tem comandos mais acessíveis e fáceis de manejar.



Comando simples




Amplo espaço para os pés

Acessível

Porque, graças aos seus apoios de braços rebatíveis, o seu assento giratório e o seu guiador ajustável podes deslocar-te para a frente, poderás subir e descer da scooter de uma maneira mais fácil e cómoda.






Guiador ajustável mediante alavanca

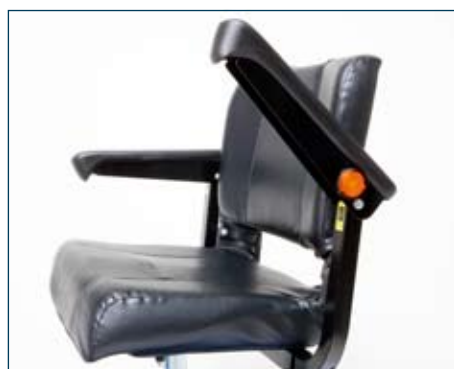

Assento acolchoado, giratório, com apoio de braços rebatíveis

Little Gem^{®2}

Tão pequena e manejável que te
levará a todas as partes

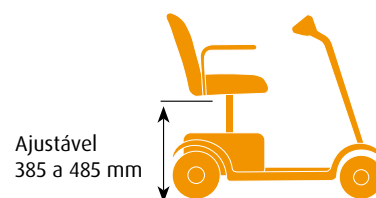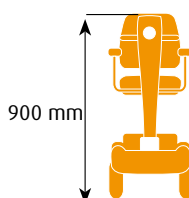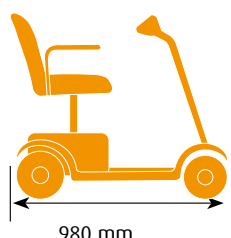

Especificações técnicas

Versão	4 rodas	Peso das baterias (unidade)	4.31 kg
Largura total	510 mm	Peso assento	10.4 kg
Longitude total	980 mm	Peso trem traseiro	10.8 kg
Altura total	900 mm	Peso da parte mais pesada	16 kg
Altura do assento	Ajustável 385 a 485 mm	Raio de giro	1150 mm
Velocidade máxima	6.4 km/h	Inclinação máx.	9°
Baterias	12 Amp	Distância chão-base	70 mm
Autonomia máxima*	16 km	Pneus	Maciças
Cor	Azul	Rodas dianteiras	175 mm (7")
Peso máx.utilizador (incl. cargas adicionais)	113 kg	Rodas traseiras	190 mm (7.5")
Peso total	40 kg	Luzes e Indicadores	Não

Tolerância de fábrica: +/- 1 cm

*A autonomia foi calculada sob condições de ensaio. O peso, o terreno e o tempo podem variar estes dados.

Os nossos produtos estão em constante processo de melhorias, pelo que a Sunrise Medical reserva-se no direito de alterar o desenho dos mesmos e as especificações indicadas sem aviso prévio.



Sunrise Medical S.L

Polígono Bakiola, 41
48498 Arrankudiaga, Vizcaya
Tel.: +34 (0) 902 14 24 34
Fax: +34 (0) 94 648 15 75
www.SunriseMedical.es